



MagniLink TAB

Draagbare Beeldschermloep

Inhoud

1	Over LVI.....	3
2	Inleiding MagniLink TAB.....	4
3	Veiligheidsinformatie	5
4	Uitpakken	6
4.1	Verpakking	6
5	Hardware.....	7
5.1	Standaard.....	7
5.2	Tabletcomputer	8
5.3	Afstandscamera	9
5.4	Installatie	10
6	Software.....	11
6.1	Functies via menu's	12
6.2	Functies via gebaren	15
6.3	Functies via het toetsenbord.....	16
6.4	Venster Informatie en instellingen.....	18
6.5	Kwaliteit van het OCR-proces.....	22
7	Ergonomie.....	23
8	Technische informatie	24
9	Conformiteitsverklaring.....	269

1 Over LVI

LVI Low Vision International AB is opgericht in 1978 en is wereldwijd één van de meest toonaangevende producenten van apparatuur voor personen met een beperkt gezichtsvermogen. Nieuwe producten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met gebruikers en professionals op het gebied van visuele rehabilitatie. LVI is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsbewaking) en ISO 14001 (milieu).

LVI aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in deze handleiding. LVI aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor directe, indirecte, punitieve, bijkomende of gevolgschade als gevolg van enige onjuistheid of tekortkoming in deze handleiding. LVI behoudt zich te allen tijde het recht voor, deze handleiding en de daarin beschreven producten in het kader van voortdurende productontwikkeling zonder voorafgaande kennisgeving of daaruit voortvloeiende andere verplichting te verbeteren.

2 Inleiding MagniLink TAB

Hartelijk dank dat u voor dit systeem hebt gekozen. Ons doel is dat u tevreden bent over uw keuze van leverancier en leeshulp.

MagniLink TAB is een systeem met een tabletcomputer en een standaard, ontwikkeld om het dagelijks leven gemakkelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. Het systeem biedt autofocus, diverse artificiële kleuren en de mogelijkheid tot vergroting. OCR-behandeling van een tekst is mogelijk en bovendien kan de tekst hardop worden gelezen door een spraaksynthesizer.

**CE**

De MagniLink TAB voldoet aan alle voorwaarden voor CE-markering van medische apparatuur in overeenstemming met Richtlijn 93/94/EEG. Onze producten voldoen aan MDD 93/94/EEG met aanvullingen uit Richtlijn 2007/47/EC.

3 Veiligheidsinformatie

- Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die bij het product wordt geleverd. Gebruik van een verkeerd type voedingsadapter kan het systeem beschadigen.
- Gebruik het toestel nooit als het werd blootgesteld aan water of andere vloeistoffen. Een beschadigd of nat toestel kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Plaats de voedingskabel zo dat u er niet over kunt struikelen en dat geen klemschade kan optreden.
- Als het toestel uit een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst, kan zich in de eenheid of op de cameralens condens (vocht) vormen. Om problemen door condensvorming te voorkomen, dient het toestel voorafgaand aan gebruik ten minste 30 minuten in de betreffende ruimte te staan.
- Maak voor het reinigen van het toestel eerst alle kabels los. Gebruik voor het reinigen een enigszins vochtige (niet natte) doek. Gebruik uitsluitend water of een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor monitors en computers.
- Wanneer het systeem moet worden verplaatst, haal dan de afstandscamera eraf (indien van toepassing), klap het systeem in en til het op met het handvat.
- Let erop dat u bij het inklappen van het systeem uw vingers niet afklemt.
- U kunt niet 100 procent zeker zijn van de resultaten van een OCR-conversie omdat de OCR-motor de tekst onjuist kan interpreteren. Houd hier vooral rekening mee als u werkt met gevoelige informatie, bijvoorbeeld een medisch voorschrift.

Neem bij twijfel contact op met LVI.

WAARSCHUWING



Het product is bij aflevering verpakt in een plastic zak. Houd de zak buiten bereik van kinderen om risico van verstikking te voorkomen.

4 Uitpakken

Het systeem wordt geleverd in een doos met de volgende inhoud:

- Standaard
- Tabletcomputer (Microsoft Surface)
- Voedingsadapter
- Afstandscamera
- Poetsdoekje
- Doos
- Gebruikershandleiding

Controleer eerst de doos op uitwendige beschadiging. Neem in geval van beschadiging contact op met de vervoerder en stel deze op de hoogte van de schade.

Open de doos, neem de MagniLink TAB uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.

4.1 Verpakking

De verpakking bestaat uit het volgende materiaal (LVI adviseert om de verpakking te bewaren in verband met eventueel terugsturen of verhuizen van het systeem):

- Verpakkingsmateriaal (XPE)
- Doos (golfkarton)
- Polyethyleen (LDPE4)

Neem voor het sorteren en inleveren van verpakkingsmateriaal contact op met uw afvalverwerker voor informatie over de regels die in uw gemeente gelden.

Denk eraan dat het product en zijn accessoires moeten worden gerecycled als elektronisch afval. Een uitgeputte batterij wordt gerecycled als elektronisch afval.

5 Hardware


5.1 Standaard



De standaard bestaat uit een arm met een houder voor een tabletcomputer. De arm van de standaard functioneert ook als handvat wanneer het systeem wordt ingeklapt en verplaatst. De standaard bevat ook een hulpstuk voor een afstandscamera.

Als de tablet terug in de standaard moet worden gezet, is het belangrijk deze erin te zetten met de camera omlaag. Anders kan het moeilijk zijn om deze te verplaatsen.

5.2 Tabletcomputer

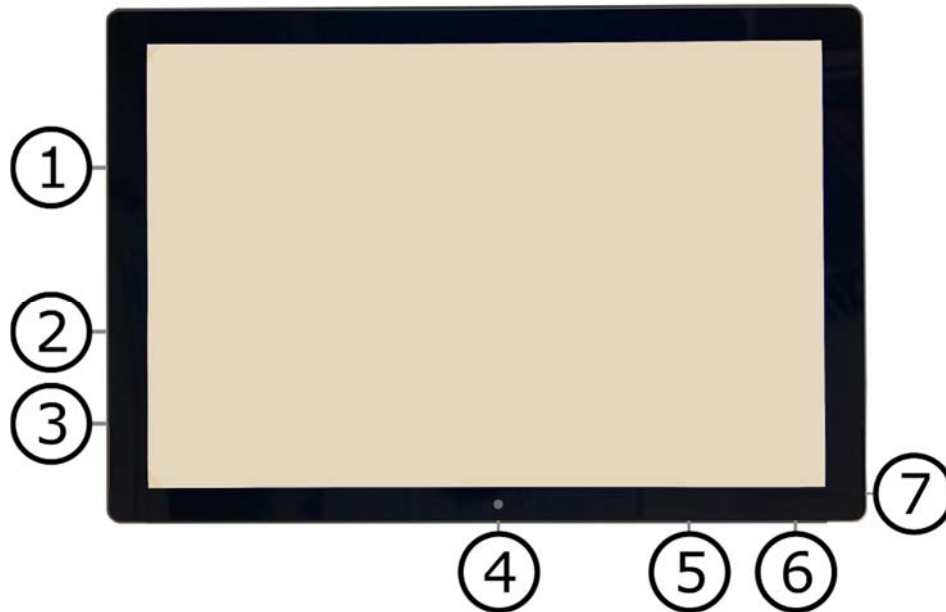

De tabletcomputer is van het type Microsoft Surface Pro.

1. Voedingsadapterpoort.
2. USB-poorten.
3. Mini-DisplayPort voor het aansluiten van een externe monitor.
4. Camera.
5. Volumeregeling.
6. Aan/Uit-knop. Indrukken om te starten. Om de stand-bymodus te openen, drukt u de knop in en laat u deze meteen weer los. Houd de knop ingedrukt om de eenheid af te sluiten.
7. Hoofdtelefoonaansluiting.

5.3 Afstandscamera



De afstandscamera wordt op de tabletcomputer aangesloten via een USB-kabel. De cameralens kan omlaag worden geklapt als u een voorwerp van een afstand wilt bekijken.

5.4 Installatie



1. Plaats de standaard op een tafel voor de plaats waar u zit.
2. Pak de arm van de standaard en manoeuvreer deze naar de gewenste positie.
3. Sluit de stroomadapter aan op de poort aan de linkerkant van de tablet.
4. Plaats de afstandscamera aan de rechterkant van de standaard. Sluit de USB-kabel van de camerabehuizing aan op de USB-poort aan de linkerkant van de tablet.

6 Software

De software is reeds geïnstalleerd en start automatisch wanneer u de eenheid inschakelt. De software bevat drie verschillende weergaven: een cameraweergave, een OCR-weergave en een instellingenweergave. De diverse functies van de software kunnen worden bediend via menu's, gebaren of het toetsenbord. Wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht, wordt de software automatisch bijgewerkt.

Als u de software wilt afsluiten, houd dan vijf vingers op het scherm om de modus volledig scherm te verlaten. Tik op de x in de rechterbovenhoek

LVI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor conflicten die zich kunnen voordoen wanneer gebruikers externe software op het apparaat installeren. Als zich problemen voordoen, is er een herstelpunt. Tik op **Zoeken** om Windows naar dit punt te herstellen. Typ in het zoekvak op **Herstel** en klik dan op **Herstellen**. Druk op **Systeemherstel openen** en selecteer het herstelpunt **LVI-fabrieksinstellingen**. Het herstellen van het systeem kan een uur duren.

6.1 Functies via menu's

Het volgende menu wordt weergegeven wanneer de toepassing in de cameraweergave is.



Schakelen tussen cameraweergave en OCR-weergave.



Schakelen tussen afstandscamera en de camera's aan de voor- en achterkant. Door één keer te drukken met twee vingers wordt de richting gewijzigd.



Inzoomen.



Uitzoomen.



OCR starten. Bij het indrukken van de knop met twee vingers, wordt het resultaat van de OCR-verwerking weergegeven op een nieuwe pagina.



Open een submenu met de volgende twee knoppen.



Video opnemen. Door een keer te drukken met twee vingers, wordt opnemen gestart zonder dialoog.



Een foto maken. Door een keer te drukken met twee vingers, wordt een foto gemaakt zonder dialoog.



Open een submenu met de volgende vijf knoppen.



Schakelen tussen natuurlijke kleuren en grijswaarden.



Schakelen tussen artificiële kleuren. Door met twee vingers te drukken gaat het palet met kunstmatige kleuren achteruit.



Helderheid of contrast verhogen.



Helderheid of contrast verminderen.



Spiegelbeeld.



De Instellingenweergave openen.

Het volgende menu wordt weergegeven wanneer de toepassing in de OCR-weergave is.



Schakelen tussen cameraweergave en OCR-weergave.



Open een submenu waar de volgende twee alternatieven te vinden zijn.



Open document. Selecteer vanaf het dialoogvenster het bestand dat u wilt openen. Het is mogelijk opgeslagen ZIP-bestanden te openen.



Document opslaan. U krijgt automatisch een voorstel voor een bestandsnaam (actuele datum en tijd). Het is mogelijk de tekst op te slaan als een RTF-bestand (.rtf) of als een Zip-bestand.



Start lezen.



Teruggaan in de tekst. Afhankelijk van welke leesmodus is geselecteerd, gaat u terug naar het vorige teken, woord, zin of blok. Door één keer te drukken met twee vingers gaat u terug naar de vorige pagina.



Vooruitgaan in de tekst. Afhankelijk van welke leesmodus is geselecteerd, gaat u vooruit naar het volgende teken, woord, zin of blok. Door één keer te drukken met twee vingers gaat u naar de volgende pagina.



Open een submenu met de volgende twee instellingen.



Overschakelen naar de volgende leesmodus. De beschikbare modi zijn: teken, woord, zin en blok.



Wijzigen van de weergavemodus. De beschikbare weergavemodi zijn "page view", "row view", "word view", "image view", "image and word" en "image and row".



Lettergrootte vergroten.



Lettergrootte verkleinen.



Open een submenu met de volgende vier knoppen.



Schakelen tussen natuurlijke kleuren en grijswaarden.



Schakelen tussen artificiële kleuren. Door met twee vingers te drukken gaat het palet met kunstmatige kleuren achteruit.



Helderheid of contrast verhogen.



Helderheid of contrast verminderen.



De Instellingenweergave openen.

6.2 Functies via gebaren

Sommige menu's kunnen worden bediend via gebaren op de tablet. Ingedrukt houden betekent dat de vingers langer dan een halve seconden op een plaats moeten worden gehouden. In de instellingen kunt u kiezen welke gebaren u wilt uitschakelen.

Indrukken met twee vingers	Natuurlijke kleuren
Indrukken met drie vingers	Autofocus aan/uit Niet mogelijk met de camera aan de voorkant.
Lang indrukken met één vinger	OCR-verwerking starten
Ingedrukt houden met twee vingers	Hoekcorrectie aan/uit
Ingedrukt houden met drie vingers	Spiegelbeeld
Ingedrukt houden met vier vingers	Instellingen openen
Ingedrukt houden met vijf vingers	Volledig scherm schakelen
Knijpen	Vergroting wijzigen
Eén vinger slepen	Door de afbeelding pannen
Twee vingers horizontaal slepen	Contrastniveau wijzigen
Drie vingers horizontaal slepen	Handmatige focus wijzigen (in cameraweergave) Alleen mogelijk met de afstandscamera.
Vier vingers horizontaal slepen	Instellen van de spreesnelheid (in OCR-weergave)
Twee vingers verticaal slepen	Wijzigen van de weergavemodus
Drie vingers verticaal slepen	Artificiële kleuren wijzigen
Dubbel tikken met één vinger	Volumeregeling
	Menu verbergen

6.3 Functies via het toetsenbord

De meeste functies kunnen worden bediend met gebruik van het toetsenbord. De sneltoetscommando's kunnen in de instellingen worden gewijzigd. Hieronder volgen de standaardinstellingen van de sneltoetscommando's.

F1	Natuurlijke kleuren
F2	Positieve kleuren vooruit
Shift + F2	Positieve kleuren achteruit
F3	Negatieve kleuren vooruit
SHIFT + F3	Negatieve kleuren achteruit
Pijltje omhoog	De vergroting vergroten
Pijltje omlaag	Vergroting verminderen
Ctrl + J	Autofocus aan/uit Niet mogelijk met de camera aan de voorkant.
Shift + pijltje omhoog	Vergroten van de focusafstand Alleen mogelijk met de afstandscamera.
Shift + pijltje omlaag	Verkleinen van de focusafstand Alleen mogelijk met de afstandscamera.
Pijltje naar rechts	Verhogen van helderheid/contrast
Pijltje naar links	Verlagen van helderheid/contrast
Ctrl + I	Reflecteren van het camerabeeld
Ctrl + K	Hoekcorrectie aan/uit
Ctrl + F	Volledig scherm schakelen
Ctrl + B	Batterijstatus weergeven
F9	Instellingen
F7	Camera schakelen
F5	Afbeelding bewaren
Shift + F5	Afbeelding snel bewaren
Ctrl + F5	Starten van de video-opname
Ctrl + Shift + F5	Snel starten van de video-opname


A	Pan links Alleen mogelijk als het beeld vergroot wordt. Niet mogelijk met de afstandscamera.
D	Pan rechts Alleen mogelijk als het beeld vergroot wordt. Niet mogelijk met de afstandscamera.
W	Pan omhoog Alleen mogelijk als het beeld vergroot wordt. Niet mogelijk met de afstandscamera.
S	Pan omlaag Alleen mogelijk als het beeld vergroot wordt. Niet mogelijk met de afstandscamera.
F4	OCR starten De tekst van de OCR-verwerking vervangt de bestaande tekst.
Shift + F4	Start OCR invoeren De tekst van de OCR-verwerking wordt op een nieuwe pagina ingevoerd.
V	Schakelen tussen cameraweergave en OCR-weergave
Alt + F5	Documenten opslaan
F6	Openen van document
Shift + Plus	Lettergrootte vergroten
Shift + Minus	Lettergrootte verkleinen
1	Start lezen
2	Stop lezen
B	Wijzigen van de weergavemodus
3	Lezen voorafgaande
4	Lezen volgende
5	Switchen leesmodus
Pagina naar beneden	Volgende pagina Wanneer meerdere pagina's zijn gescand, gaat u naar de volgende pagina.

Pagina omhoog	Vorige pagina Wanneer meerdere pagina's zijn gescand, gaat u naar de vorige pagina.
8	Verlaagt het volume
9	Verhoogt het volume
6	Verlaagt de spreek snelheid
7	Verhoogt de spreek snelheid
Ctrl + 0	Volgende stem

6.4 Venster Informatie en instellingen

Het venster Informatie en instellingen bestaat uit een aantal verschillende tabs met informatie over de applicatie en de verschillende instellingen.


6.4.1 Eigenschappen van de toepassing

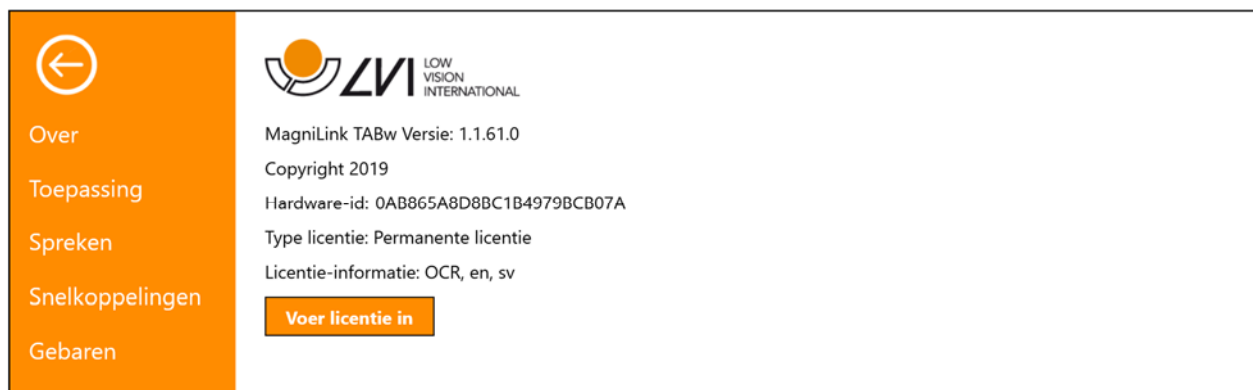

Informatie over de softwareversie en systeemicentie kunnen in dit tabblad worden gevonden.

Als u de systeemicentie wilt bijwerken, kunt u dit doen door op de knop "licentie invoeren" te drukken.

6.4.2 Instellingen van de toepassing

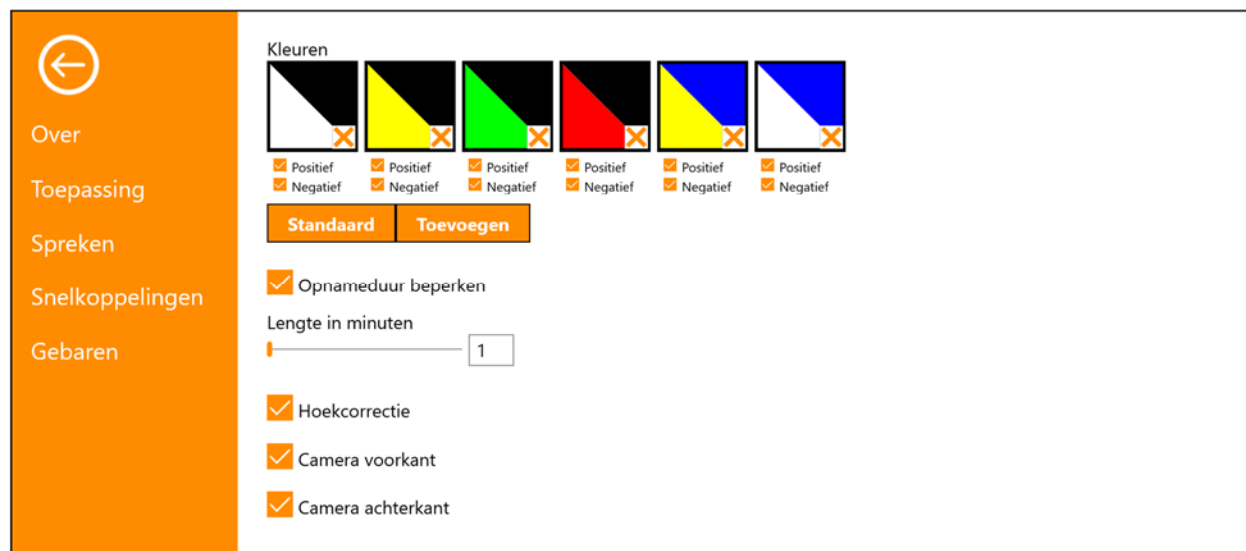

Kleuren

Het is mogelijk om de artificiële kleuren van het systeem te verwijderen.

Opnameduur beperken

Activeer deze functie wanneer u de opnameduur wilt beperken.

Lengte in minuten

Wanneer u er voor kiest om de opnameduur te beperken, kunt u hier de limiet in minuten instellen tussen 1 en 60 minuten.

Hoekcorrectie

Wanneer dit is geselecteerd, wordt de kanteling van de tablet gecorrigeerd in de video.


Camera aan de voorkant

Wanneer deze niet is geselecteerd, kan niet worden geschakeld naar de camera aan de voorkant. Het is niet mogelijk dit uit te schakelen als de achtercamera niet is geselecteerd.

Camera aan de achterkant

Wanneer deze is geselecteerd, kan niet worden geschakeld naar de camera aan de achterkant. Het is niet mogelijk dit uit te schakelen als de voorcamera niet is geselecteerd.

6.4.3 Spreek-instellingen

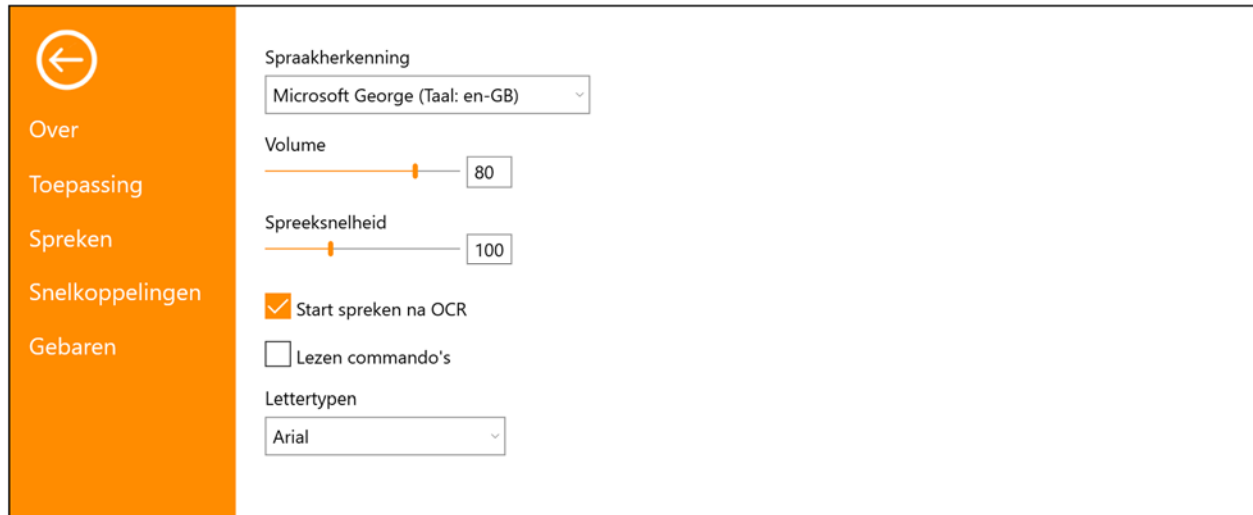

Spraakherkenning

Wanneer meerdere stemmen beschikbaar zijn, kan de gebruiker hier tussen kiezen.

Volume

Het geluidsniveau van de stem instellen.

Spreeksnelheid

De spreeksnelheid instellen.

Start spreken na OCR

Als dit vakje is aangevinkt, wordt de tekst automatisch voorgelezen na OCR-verwerking van een beeld.

Lezen commando's

Wanneer dit is aangevinkt, leest de toepassing de menu's voor wanneer u ze gebruikt.

Lettertype

Hier kan de gebruiker instellen welk lettertype wordt gebruikt om de OCR-verwerkte tekst weer te geven. Het lettertype dat wordt gebruikt heeft geen invloed op het resultaat van de OCR-bewerking.

6.4.4 Sneltoetscommando's

Camera	Sneltoetscommando's
Vergroting vergroten	Pijltje omhoog
Vergroting verkleinen	Pijltje omlaag
Verhogen helderheid/contrast	Pijltje naar rechts
Verlagen helderheid/contrast	Pijltje naar links
Focusafstand verkleinen	Shift+Pijltje omlaag
Focusafstand vergroten	Shift+Pijltje omhoog
Camera schakelen	F7
Natuurlijke kleuren	F1
Positieve kleuren vooruit	F2
Positieve kleuren achteruit	Shift+F2
Negatieve kleuren vooruit	F3
Negatieve kleuren achteruit	Shift+F3
Afbeelding bewaren	F5
Afbeelding snel bewaren	Shift+F5
Starten video-opname	Ctrl+F5
Snel starten video-opname	Ctrl+Shift+F5
Spiegelen camerabeeld	Ctrl+I
Autofocus aan/uit	Ctrl+J
Hoekcorrectie aan/uit	Ctrl+K
Instellingen	F9
Menu verbergen	Ctrl+H
Volledig scherm schakelen	Ctrl+F
Batterijstatus weergeven	Ctrl+B
Pan links	A
Pan rechts	D

Hier kunt u de sneltoetscommando's van de applicatie veranderen. Om een sneltoetscommando te veranderen gaat u naar de tab van het te veranderen commando en voert u een nieuwe toetsencombinatie in. Als een combinatie wordt ingevoerd die al in gebruik is voor een ander commando, wordt het andere commando gewist. U moet dan een nieuwe toetsencombinatie invoeren voor het andere commando.

6.4.5 Gebaren

Algemeen	Gebaren
<input checked="" type="checkbox"/> Natuurlijke kleuren	Indrukken met twee vingers
<input checked="" type="checkbox"/> Instellingen	Ingedrukt houden met vier vingers
<input checked="" type="checkbox"/> Volledig scherm schakelen	Ingedrukt houden met vijf vingers
<input checked="" type="checkbox"/> Vergroting	Knijpen
<input checked="" type="checkbox"/> Pan	Eén vinger slepen
<input checked="" type="checkbox"/> Contrast	Twee vingers horizontaal slepen
<input checked="" type="checkbox"/> Artificiële kleuren	Twee vingers verticaal slepen
Camera	
<input checked="" type="checkbox"/> Camera schakelen	Vier vingers horizontaal slepen
<input checked="" type="checkbox"/> Hoekcorrectie aan/uit	Ingedrukt houden met twee vingers
<input checked="" type="checkbox"/> Spiegelen camerabeeld	Ingedrukt houden met drie vingers
<input checked="" type="checkbox"/> Autofocus aan/uit	Indrukken met drie vingers

Hier kunt u kiezen welke gebaren zullen worden gebruikt. Haal het vinkje weg in het desbetreffende vak om een gebaar uit te schakelen.

6.5 Kwaliteit van het OCR-proces

Voor het verkrijgen van optimale resultaten bij de OCR-conversie, dient u rekening te houden met het volgende.

- Zorg voor een voldoende sterke vergroting. Als de tekst te klein is, kan de OCR-software geen goed resultaat leveren. Voor de kleinste vergroting op de leescamera wordt een minimale lettergrootte van 12 pt aanbevolen.
- Vermijd glanspapier omdat dit reflecties in het beeld kan veroorzaken. Dit is nadelig voor het resultaat van de OCR-conversie. Als u toch glanspapier wilt gebruiken, adviseren wij om de verlichting van de eenheid uit te schakelen.
- Bepaalde lettertypen leveren problemen op bij de interpretatie door de OCR-motor.
- Het is belangrijk dat het contrast van de tekst voldoende is.
- Het is belangrijk dat de taal van de OCR-motor dezelfde is als die van de tekst.

7 Ergonomie

Het is belangrijk dat de werkplek rondom uw systeem comfortabel is en dat u een goede zithouding hebt. Op die manier kunt u het zo lang als u wilt gebruiken zonder uw nek en rug te veel te belasten.

Denk verder aan het volgende.

- Uw stoel moet dichtbij de tafel staan waarop zich de uitrusting bevindt en u moet niet te lang in de stoel blijven zitten. Wij adviseren een goede kantoorstoel waarvan de hoogte instelbaar is.
- De zitting van de stoel moet zo hoog zijn dat uw benen niet gevoelloos worden. Uw benen moeten een hoek van 90 graden maken en uw voeten moeten op de vloer rusten.
- De tafel moet zo hoog zijn dat u uw onderarm er horizontaal op kunt leggen. Het is belangrijk dat de tafel niet te hoog en niet te laag voor u is. De ideale oplossing is als het scherm zich iets onder ooghoogte bevindt en in een zo recht mogelijke lijn voor u.
- Scherm het daglicht af. Plafondlampen, tafellampen en licht van de ramen kunnen reflecties op de monitor veroorzaken. Plaats daarom geen lampen zo dat ze direct op het scherm of op uzelf schijnen.
- Als u het toestel lang achtereen gebruikt, bestaat de kans dat herhaalde bewegingen pijn veroorzaken in nek, schouders of rug. Door te lang naar een scherm te kijken kunnen uw ogen vermoeid raken.

8 Technische informatie

Standaard

Afmetingen (ingeklapt)	365 x 300 x 30 mm (B x D x H)
Afmetingen, uitgeklaapt	230 x 310 x 350 mm (B x D x H)
Gewicht	2,2 kg

Afstandscamera

Vergrotingszone	0.8 - 80x (Hoogte 33 cm)
Gewicht	700 g
Verversingsfrequentie	60 Hz
Lengte van camera en arm	620 mm

Tabletcomputer

Type	Microsoft Surface Pro
Gewicht	800 g
Grootte van het scherm	12.3"
Resolutie	2736 x 1924
Vergrotingszone (Ingebouwd in camera)	0.7 - 8x (Hoogte 30 cm)
Werktijd accu	In gebruik: ongeveer 2,5 uur
Temperatuurbereik	0°C – 35°C
Afmetingen (B x H x D)	292 x 202 x 8 mm



Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (geldt voor de EU-landen en voor alle andere Europese landen met een speciaal inzamelsysteem)

Als het product of zijn verpakking dit symbool heeft, mag het niet als gewoon huishoudelijk afval worden verwerkt. Het moet worden afgegeven aan een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product op een verantwoorde wijze te verwerken, helpt u om de negatieve gevolgen voor gezondheid en milieu te voorkomen die anders zouden kunnen optreden bij ongeschikte verwijdering van dit product. Recycling helpt bij het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, de afvalverwerker of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

9 Conformiteitsverklaring

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the Medical Devices Directive, 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC

Type of equipment: *Reading Aid*
Brand name or trademark: *MagniLink*
Type designation: ***MLTAB***
Product class: *Class 1.*
Manufacturer: *LVI Low Vision International AB*
Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*
Web: <http://www.lvi.se>
Phone: *+46 470 - 72 77 00*
Fax: *+46 470 - 72 77 25*

As the manufacturer, we declare under our sole responsibility that:

- the product complies with the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC.
- we will keep the technical documentation described in section 3 of Annex VII available to the national authorities for a period ending at least five years after the last product has been manufactured.
- the device meets the Essential Requirements of Annex 1 which applies to it, taking into account the intended purpose of the device.
- to follow the requirements regarding products placed on the market as described in section 4 of Annex VII.

Manufacturer


Manufacturer's authorized representative

Date

Signature

Position

05-03-2019

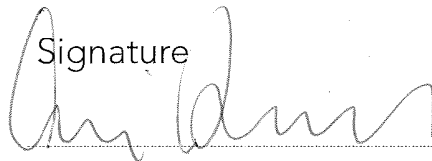

Managing Director

Clarification

Erik Bondemark

Alfabetische index

Afstandscamera	9
Conformiteitsverklaring	26
Eigenschappen van de toepassing	18
Ergonomie	23
Functies via gebaren	15
Functies via het toetsenbord	16
Functies via menu's	12
Gebaren	21
Hardware	7
Inleiding MagniLink TAB	4
Installatie	10
Instellingen van de toepassing	19
Kwaliteit van het OCR-proces	22
Over LVI	3
Sneltoetscommando's	21
Software	11
Spreek-instellingen	20
Standaard	7
Tabletcomputer	8
Technische informatie	24
Uitpakken	6
Veiligheidsinformatie	5
Venster Informatie en instellingen	18
Verpakking	6



Oplossingen voor een visuele uitdaging

Inhoudelijke of technische vragen over dit product?
Vind je het antwoord niet in deze handleiding?
Dan staan onze Service & Support collega's voor je klaar.

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Antwerpen
Kempenstraat 100
2000 Antwerpen
T+32 3 828 80 15

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60