

Explorē 8

Draagbare beeldschermloepen met 8" scherm

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 – Overzicht	3
Introductie	3
Doosinhoud.....	5
Fysieke beschrijving	6
Om te beginnen	8
Hoofdstuk 2 – Het gebruik van uw systeem. 9	
Aanzetten.....	9
Uitzetten.....	10
Vergrotings Mode	10
In –en Uitzoomen.....	11
Veranderen van contrast	11
Aan en uitzetten van de lichten.....	12
Lijnen en beeldafdekking	12
Autofocus	14
Vastleggen van een afbeelding	15
Navigeren op een vastgelegde afbeelding	16
Galerij Mode	17
Toegang tot de Galerij	19
Het verwijderen van afbeeldingen in de Galerij	20
Het gebruik van een extern scherm.....	21
Hoofdstuk 3 – Exporteren van afbeeldingen naar uw pc.....	21
Hoofdstuk 4 – Menu	22

Toegang tot het menu en het veranderen van instellingen	22
Hoofdstuk 5 – Updating van uw Systeem ..	27
Hoofdstuk 6 – Opladen van uw System	28
Hoofdstuk 7 – Probleem oplossen	31
BIJLAGE A – Veiligheid en onderhoud	34
BIJLAGE B – Specs	38
BIJLAGE C – FCC Info.....	39
BIJLAGE D – Garantie	41

HOOFDSTUK 1 – OVERZICHT

INTRODUCTIE

Bedankt voor het aanschaffen van de HumanWare Explore 8, de lichte en gebruiksvriendelijke draagbare elektronische handloep met een groot, gemakkelijk af te lezen 8 "scherm. Met uw Explore 8 leest u in een mum van tijd de mooi weergegeven tekst.

Omdat we zelf vergrotingsgebruikers zijn, weten we bij HumanWare dat naast de best beschikbare beeldkwaliteit, een goede vergrootglas eenvoudig, draagbaar, comfortabel in gebruik en altijd klaar moet staan wanneer je het nodig hebt, waar je het nodig hebt. Uw Explore 8 is met dat doel ontworpen, want we zijn er trots op u een kwaliteitsproduct aan te bieden dat aan uw behoeften en verwachtingen voldoet.

Lees aandachtig de bedienings- en veiligheidsinstructies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven voordat u uw apparaat gebruikt. Als u vragen over uw systeem hebt, neem dan contact op met de klantenservice van HumanWare door de contactgegevens in de achterkant van deze gebruikershandleiding te raadplegen.


Copyright 2017 by Technologies HumanWare Inc., all rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Technologies HumanWare Inc.

DOOS INHOUD


- EXPLORE 8 ELEKTRONISCHE LOEP
- PRODUCTREGISTRATIEKAART
- USB-LADER
- GARANTIEKAART
- USB-KABEL
- BESCHERMENDE HOES
- HDMI-KABEL
- LCD-BESCHERMER
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
- MICROFIBERDOEK

FYSIEKE BESCHRIJVING

Voorkant

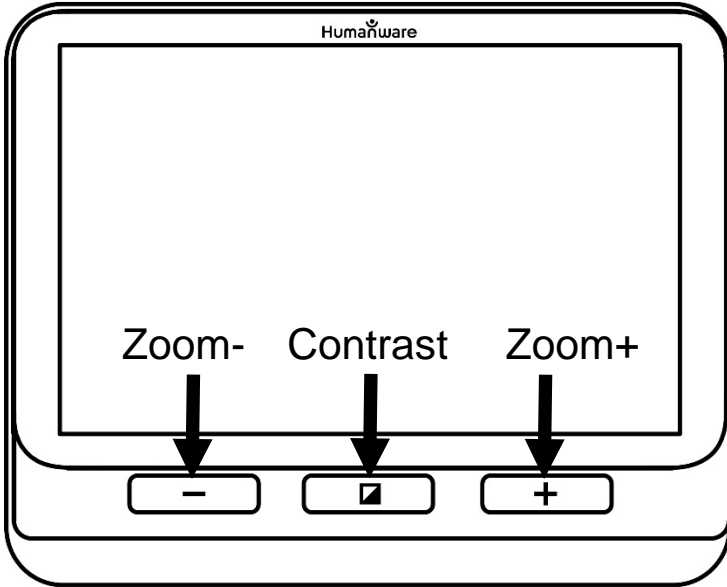


Linker zijde

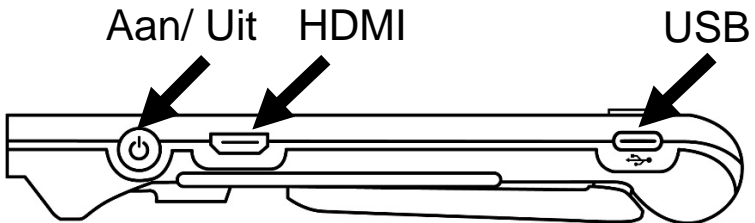

Bovenkant



Achterkant

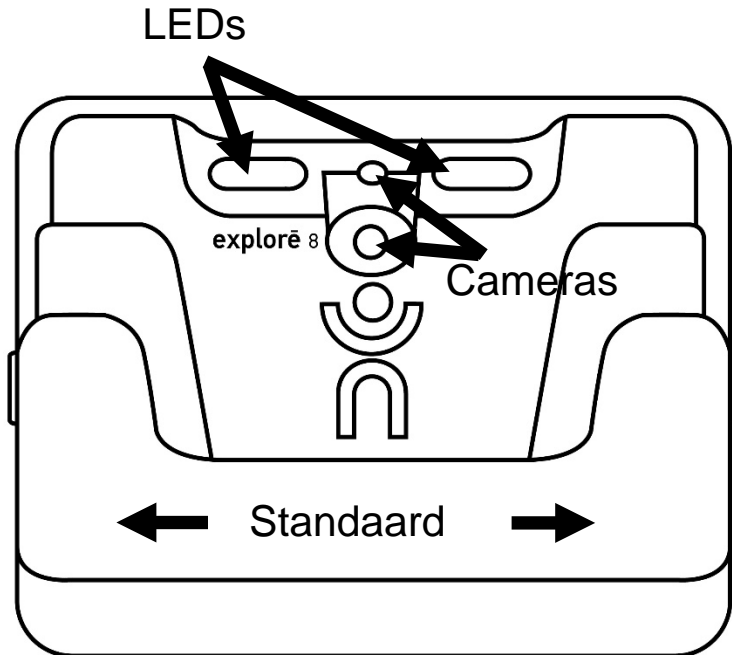

OM TE BEGINNEN

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-lader.
2. Houd de Explore 8 zo dat de schermzijde naar u toe is gericht. Zorg ervoor dat het voelbare USB-symbool op de USB-connector van de kabel zich aan de andere kant van het scherm bevindt. Sluit de kabel voorzichtig aan op de USB-poort aan de linkerkant van uw apparaat en sluit de oplader aan op een stopcontact.

BELANGRIJK: wees voorzichtig bij het plaatsen van de kabel in de USB-poort.

Laad uw apparaat op totdat uw batterij vol is. Het apparaat wordt warmer tijdens het opladen - dit is normaal.

Als het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de kabel voorzichtig los.


Druk op de **Aan / Uit knop** of vouw de leesstandaard uit om het apparaat te gebruiken.

HOOFDSTUK 2 – HET GEBRUIK VAN UW SYSTEEM

AAN ZETTEN

Om uw tablet te op te starten, drukt u eenvoudig op Aan/ Uit knop aan de linkerkant van het apparaat. Het apparaat kan dan aan de zijkanten worden vastgehouden, net zoals u een tablet zou vasthouden.

U kunt ook uw apparaat inschakelen door simpelweg de leesstandaard achter het apparaat uit te klappen en deze te plaatsen boven het geen u wilt lezen.

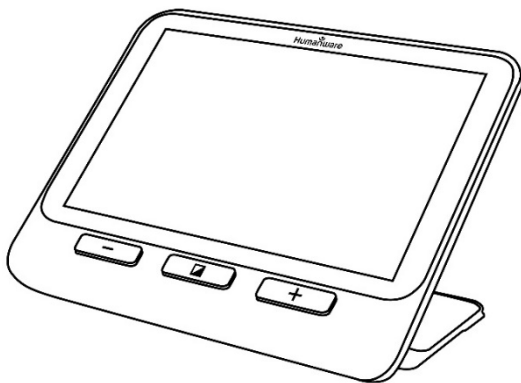

Na een paar seconden wordt het scherm ingeschakeld en wordt het beeld van de camera weergegeven. Dit is de **Vergrootglasmodus**.

UITSCHAKELEN

Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u gewoon op de Aan/ Uit knop.

VERGROTINGSMODES

De **Vergrotermodus** is de belangrijkste bedieningsmodus van Explore 8. Met de standaard gesloten, kunt u verre objecten vergroten. Met de standaard open, kunt u dichtbij objecten of documenten op een tafel vergroten.

IN –EN UITZOOMEN

Om in te zoomen, drukt of houdt u Zoom + ingedrukt tot het beeld de juiste grootte heeft. Op dezelfde manier kunt u uitzoomen door Zoom - ingedrukt te houden totdat u tevreden bent met het beeldformaat.

Als alternatief kunt u het **knijpen en zoomen** (afname en toename van de afstand tussen twee vingers) uit het menu inschakelen om in en uit te zoomen op een live-afbeelding (zie hoofdstuk 4).

CONTRAST VERANDEREN

Met de Explore 8 kunt u het contrast aanpassen om beter aan uw behoeften en voorkeuren te voldoen. Druk eenvoudig op **Contrast** knop om het contrast te wijzigen totdat u er een vindt waarmee u vertrouwd bent.

De beschikbare contrastmodi worden hieronder vermeld:

Volle kleur, zwart op wit, wit op zwart, zwart op geel, geel op zwart

Andere contrastmodi zijn ook beschikbaar in het menu (zie hoofdstuk 4):

Zwart op oranje, Oranje op zwart, Zwart op cyaan, Cyaan op zwart, Zwart op paars, Paars op zwart, Zwart op groen, Groen op zwart, Blauw op geel, Geel op blauw, Wit op blauw, Blauw op wit

AAN EN UITZETTEN VAN DE LICHTEN

Houd **Zoom+** en **Zoom-** tegelijkertijd ingedrukt om de lichten uit te schakelen en indien nodig weer in te schakelen.

LIJNEN EN BEELDAFDEKKING

Met Explore 8 kunt u horizontale lijnen of beeldafdekking toevoegen over uw afbeelding, voor betere leesbaarheid.

Om een lijn toe te voegen of te verwijderen, drukt u en houdt u de **Contrast** en **Zoom+ knoppen** tegelijkertijd ingedrukt.

Om beeldafdekking toe te voegen of te verwijderen, drukt u en houdt u de **Contrast** en **Zoom- knoppen** tegelijkertijd ingedrukt.

AUTOFOCUS

Explore 8 heeft een autofocus die van uit het menu kan worden ingesteld op; vergrendeld, ontgrendeld en handmatig (zie hoofdstuk 4).

Wanneer autofocus is ingesteld op ontgrendeld (standaard), zal Explore 8 de focus dynamisch aanpassen aan het object dat momenteel wordt bekeken.

De focus kan worden geforceerd door ergens op het scherm te tikken.

Wanneer de autofocus is ingesteld op vergrendeld of u gebruikt uw vergrootglas in tafelbladpositie, behoudt Explore 8 de huidige focus, ongeacht eventuele bewegingen of wijzigingen.

Wanneer autofocus op handmatig is ingesteld, kunt u elke positie op het scherm aanraken om Explore 8 op die specifieke locatie te richten. Merk op dat de handmatige instelling alleen werkt in de **Vergrotermodus** op afstand. De tafemodelmodus blijft vergrendeld als de handmatige modus is geselecteerd.

EEN AFBEELDING BEVRIEZEN

Explore 8 staat u toe een afbeelding te bevriezen, terwijl u in de vergrootglasmodus bent voor betere leesbaarheid. Dit is vooral een nuttige functie, wanneer u labels of tekst op producten leest, die op de bovenste plank in de winkels staan. Om een afbeelding te bevriezen, drukt u op de **Foto knop**, terwijl u uw vergrootglas beweegt naar dat wat u wenst te lezen. Die zal een snapshot maken van waar uw apparaat op gericht was. De snapshot zal op uw scherm weergegeven worden, totdat u beslist om terug te keren naar de vergrootglas modus.

Om naar de vergrootglas modus terug te keren, drukt u nog een keer op de **Foto knop**.

NAVIGEREN OP EEN VASTGELEGDE AFBEELDING

Om op stilstaande afbeeldingen in te zoomen, drukt u op de **Zoom+ knop**, totdat de afbeelding de juiste grootte heeft. Evenzo kunt u uitzoomen door te drukken op de **Zoom-knop** totdat u tevreden bent met de afbeeldingsgrootte.

Als alternatief kunt u het **knijpen en zoomen** (afname en toename van de afstand tussen twee vingers) uit het menu inschakelen om in en uit te zoomen op een live-afbeelding (zie hoofdstuk 4).

Houd uw vinger omlaag en schuif deze over het scherm om andere delen van een vastgelegde afbeelding te bekijken.

Voor een live-afbeelding drukt u op **Contrast** om het contrast te wijzigen totdat u er een vindt waarmee u vertrouwd bent.

GALERIJ MODI

Om een live of bevroren afbeelding in uw galerij op te slaan, houdt u de foto knop een halve seconde ingedrukt in de vergrootmodus.

U zou een 'opslaan-bericht' kort op uw scherm moeten zien, wat betekent dat uw afbeelding nu in de galerij van Explore 8 wordt opgeslagen.

U kunt ook het tik-en-houd-gebaar (houd uw vinger op het scherm) vanuit het menu inschakelen om een afbeelding in de galerij op te slaan (zie hoofdstuk 4).

TOEGANG TOT DE GALERIJ

Om toegang te krijgen tot uw afbeeldingen in de Galerij, drukt u tegelijkertijd op **Contrast** en de **Fotoknop**. Veeg met uw vinger naar links of rechts op het scherm om een afbeelding te selecteren. U kunt ook op de pijlen op het scherm drukken om een afbeelding te selecteren.

U kunt in- en uitzoomen op opgeslagen afbeeldingen door op Zoom + of Zoom- te drukken of deze ingedrukt te houden. U kunt ook het knijpen en zoomen (afname en toename van de afstand tussen twee vingers) vanuit het menu inschakelen om in en uit te zoomen op een opgeslagen afbeelding (zie hoofdstuk 4).

Om de Galerij te verlaten en terug te keren naar de Vergroot-modus, drukt u op Terug (op het scherm) of houdt u Contrast ingedrukt.

VERWIJDEREN VAN AFBEELDINGEN UIT UW GALERIJ

Als u een afbeelding uit de galerij wilt verwijderen, opent u de **Galerij** en navigeert u naar de afbeelding die u wilt verwijderen (veeg met uw vinger naar links of rechts over het scherm of met de pijlknoppen) en houdt u vervolgens de **Fotoknop** ingedrukt.

U kunt ook het **tik-en-houd-gebaar** (houd uw vinger op het scherm) vanuit het menu inschakelen om een afbeelding te verwijderen (zie Hoofdstuk 4).

U hebt de optie om te **Verwijderen** of **Annuleren**. Druk op **Delete** om het verwijderen te bevestigen. Als u het verwijderen wilt annuleren, drukt u op **Annuleren** of **Contrast**.

U kunt al uw afbeeldingen in het menu **verwijderen** (zie hoofdstuk 4). Houd **Contrast** ingedrukt en selecteer Galerij verwijderen.

EEN EXTERN SCHERM GEBRUIKEN

Voor een grotere afbeelding wilt u mogelijk dat de inhoud van Explore 8 wordt weergegeven op een extern scherm (zoals een tv). Om dit te doen, sluit u uw Explore 8 eenvoudig aan op een extern scherm met behulp van de meegeleverde HDMI-kabel. Raadpleeg bijlage B voor een lijst met ondersteunde HDMI-indelingen.

HOOFDSTUK 3 – EXPORTEREN VAN FOTO'S NAAR DE COMPUTER

Om galerijafbeeldingen te exporteren die zijn opgeslagen op de Explore 8 naar uw computer, verbindt u uw apparaat met uw computer met de meegeleverde USB-kabel. Er zou een bericht "PC connected" moeten verschijnen op uw apparaat. U kunt nu de

afbeeldingen van uw galerij kopiëren en plakken naar uw computer met behulp van de bestandsbrowser van uw computer.

Bij aansluiting op een pc werkt het apparaat precies zoals een USB-stick of een externe schijf. Galerijafbeeldingen bevinden zich in de map Afbeeldingen op uw Explore 8.

Wanneer u foto's van het apparaat kopieert of verwijdert, mag u **nooit** de USB-kabel loskoppelen, omdat sommige afbeeldingen tijdens het proces verloren kunnen gaan.

HOOFDSTUK 4 – MENU

TOEGANG TOT HET MENU EN INSTELLINGEN VERANDEREN

- Druk op de **Contrast knop** om het menu binnen te gaan.

- U kunt in het menu navigeren door te drukken op de **Zoom+ knop** om naar boven te scrollen en op de **Zoom- knop** om naar beneden te scrollen.
- Om een item te selecteren, drukt u op de **Foto knop**. Om terug te gaan naar het vorige menu, drukt u op **Contrast**, of u drukt op **Contrast** en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar de vergrootglas modus.

Het menu bevat de volgende items:

- **Gallery** (Toegang tot galerij afbeeldingen)
- **Autofocus**: Ontgrendeld*, Vergrendeld (Vergrendeld * in standaard modes), Handmatig (Vergrendeld in standaard modes)
- **Scherm Helderheid** (Verander het helderheidsniveau van het scherm): 1 to 9 (8*)
- **Touchscreen** (submenu, tik om bewegingen en trillingen in te schakelen)

- **Knijpen en zoomen** (verlaag / vergroot de afstand tussen twee vingers om uit / in te zoomen)
- **Trillingen**
- **Tikken & vasthouden** (Houd de vinger omlaag in Vergrootglas om de afbeelding op te slaan in Galerij)
- **Auto-off:** (geef aan hoe lang het apparaat aan mag staan): 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten*, 10 minuten
- **Voorkeur Zoom** (Verander het standaard zoomniveau wanneer u uw apparaat opent): Vorige (het zoomniveau waarop u zich bevond toen u uw apparaat sloot), 2x* to 22x
- **Contrast** (submenu)
 - **Voorkeur Contrast (selecteer contrast waarin Explore 8 opstart):** Previous* (laatst gebruikte contrast), Color (=kleur), ingeschakelde contrasten

- **Menu** (verander kleuren van het menu): Zwart op wit *, Wit op zwart, Zwart op geel, Geel op zwart, Zwart op oranje, Oranje op zwart, Zwart op cyaan, Cyaan op zwart, Zwart op paars, Paars op zwart, Zwart op groen , Groen op zwart, Blauw op geel, Geel op blauw, Wit op blauw, Blauw op wit
- **Ingeschakelde contrasten** (selecteer geactiveerde kleurenparen voor de vergrotermodus): Zwart op wit *, Wit op zwart, Zwart op geel, Geel op zwart, Zwart op oranje, Oranje op zwart, Zwart op cyaan, Cyaan op zwart, Zwart op paars, Paars op zwart, zwart op groen, groen op zwart, blauw op geel, geel op blauw, wit op blauw, blauw op wit
- **Lijnen en beeldafdekking:** Lijnen, Beeldafdekking, Geen*
- **Lichten:** Aan*, Laag, Uit

- **Menu Text Size:** Small, Medium*, Large
- **Language:** English US*, English UK, French (CA), French (FR), Spanish (US), Spanish (ES), German, Dutch, Danish Polish, Portuguese (PT), Portuguese (BR), Norwegian, Italian, Swedish, Finnish, Russian, Czech, Japanese, Korean, Icelandic, Estonian, Turkish, Lithuanian, Hungarian, Latvian, Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Hebrew
- **Display (=weergave):** 50Hz , 60Hz*
- **Delete Gallery (=verwijder Gallery)**
- **Fabrieksinstellingen**
- **Over** (View information about your device):
Software, Hardware, Serial Number

HOOFDSTUK 5 – UPDATEN VAN UW EXPLORE

Ga naar:

<http://www.humanware.com/support/explore8>


en download de laatste versie van de Explore 8 software. Verbind uw apparaat aan uw computer met behulp van de bijgeleverde USB-kabel. Plak uw gedownloade bestand direct in uw Explore 8 root, met behulp van de verkenner van de computer. Wanneer de overdracht voltooid is, ontkoppel dan uw USB-kabel van de computer. Start uw Explore 8 op. Het apparaat moet zichzelf automatisch updaten.

HOOFDSTUK 6 – OPLADEN VAN UW EXPLORE

BELANGRIJK: De batterij wordt warm tijdens het opladen. Dit is normaal. Laad de batterij niet op naast een hete bron. Om de batterij op te laden, via een stopcontact, moet u:

- De oplaadbare USB-kabel verbinden aan de stroomtoevoer van de Explore 8. Daarna moet u de oplaadbare USB-kabel voorzichtig verbinden aan de loep en sluit de stroomtoevoer aan op een stopcontact.
- Laat het apparaat opladen, totdat de batterij vol is. Het duurt ongeveer 3,5 uur om een leeg apparaat op te laden.

Tijdens het oplaadproces, zal de afbeelding hierna zich even laten zien, wanneer de batterij gaat beginnen met opladen of wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

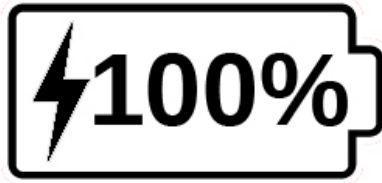

Het bliksemschicht icoon betekent dat het apparaat wordt opgeladen. Het getal rechts geeft het percentage aan in hoeverre de batterij al is opgeladen.

Vanwege lagere spanning, kan het opladen van de computer USB langzamer verlopen. In sommige gevallen kan de loep helemaal niet opgeladen worden, afhankelijk van de hoeveelheid kracht die de computer uitstoot. De meest effectieve manier om het apparaat op te laden is door de bijgeleverde USB-kabel te gebruiken, verbonden aan de oplader, om zo de loep op te laden vanuit een stopcontact.

Hoewel het de oplaadtijd verlengt, kan het apparaat gebruikt worden tijdens het opladen

Let erop dat wanneer de batterij helemaal leeg is of voor een langere tijd niet gebruikt is, het tot een paar minuten kan duren, voordat het apparaat reageert. Dit is normaal.

Merk ook op dat, net als alle elektronische apparaten, uw Explore 8 warm zal worden wanneer deze in gebruik is of wanneer deze wordt opgeladen - dit is normaal.

Batterij veiligheidsmaatregelen:

- Demonteer of pas de batterij niet aan.
- Gebruik alleen de gespecificeerde HumanWare oplader.
- Er bestaat een risico op oververhitting, brand of explosie als de batterij vlam vat, verwarmd wordt, onderworpen is aan een botsing, in contact gebracht wordt met water, of als de aansluitingen te maken krijgen met kortsluiting.

HOOFDSTUK 7 – PROBLEMEN OPLOSSEN

Explore 8 gaat niet aan:

Druk op de **aan-/uitknop** en houdt deze een poosje ingedrukt. Als het apparaat nog steeds niet aan gaat, zou het kunnen zijn dat de batterij van het apparaat opgeladen moet worden.

Verbind de bijgeleverde USB-kabel aan de stroomvoorziening in een stopcontact of alleen de USB-kabel aan een ingeschakelde computer. Als de batterij helemaal leeg is, zou het een paar minuten kunnen duren voordat het apparaat reageert..

Zie **Hoofdstuk 6** voor aanvullende details.

Het scherm is zwart:

Als het apparaat op een tafel of glad oppervlak ligt, kan de afbeelding zwart zijn. Til de loep op om te zien of dit de reden is voor het zwarte scherm.

Als het probleem niet oplost, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten.

Beeld is onscherp in vergrootglas:

Zorg ervoor dat Autofocus is ingesteld op Ontgrendeld in het menu. Verplaats het apparaat heen en weer over het document dat u bekijkt. Hierdoor wordt Explore 8 opnieuw op het document gericht.

Explore 8 sluit af na inactiviteit:

Dit is normaal gedrag bedoeld om de batterij te sparen. De Explore 8 zal standard afsluiten na 5 minuten van inactiviteit. Het is mogelijk om de standaard auto-afsluiten timer te configureren tot 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten of 10 minuten.

Kleuren zijn moeilijk te detecteren:

Zorg er allereerst voor dat er genoeg omgevingslicht rondom u is.

Kies een verschillende kleurencombinatie door op de **Contrast knop** te drukken, terwijl u in de vergrootglas modus bent.

Er is veel schittering:

Kantel het object, waar u naar aan het kijken bent, in een andere richting om schittering te verminderen.

U kunt ook proberen de lichten uit te doen door de **Zoom+** en **Zoom-** ingedrukt te houden.

Explore 8 reageert niet:

Let er op dat de Explore 8 niet opgeladen wordt doormiddel van de USB kabel, als dat wel het geval is haalt u de USB kabel uit de Explore 8. Druk op de Aan/ Uit knop voor 10 seconden. Het system gaat dan uit. Druk dan op de Aan/ Uit knop om de Explore 8 weer in te schakelen

Andere problemen:

Herstel naar fabrieksinstellingen in het menu.

Houd **Contrast** ingedrukt. Blader omlaag naar Fabrieksinstellingen en selecteer Ja.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

- Kijk niet naar de LED-lichtbron aan de achterkant van het vergrootglas staren.
- Blijf uit de buurt van water of hoge luchtvochtigheid. Dompel niet onder.
- Schakel uw verkenner 8 uit voordat u hem schoonmaakt.
- Gebruik alleen kabels die zijn meegeleverd met uw verkenner 8.

Batterij:

De Explore 8 heeft een interne oplaadbare Li-Ion-batterij. De batterij moet worden vervangen door een gekwalificeerde HumanWare-technicus.

- Gebruik of verlaat het apparaat niet in de buurt van een hittebron en vuur. Bewaar niet bij hoge temperaturen.
- Gebruik alleen USB-compatibele voedingen om de batterij op te laden.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet.
- Dompel het apparaat niet onder in water, laat het niet nat worden.
- Sla niet tegen het apparaat en gooi er niet mee.
- Boor of sla het apparaat niet met scherpe voorwerpen of een hamer.
- Wrijf niet in de ogen als de batterij lekt en vloeistof in de ogen terechtkomt. Spoel in plaats daarvan de ogen met schoon stromend water en zoek

onmiddellijk medische hulp om letsel te voorkomen.

- Als de batterij lekt en in contact komt met de huid, spoel het gebied dan onmiddellijk af met schoon stromend water om letsel te voorkomen.

Het LCD-scherm schoonmaken:

Zorg ervoor dat het apparaat uit en losgekoppeld is.

Zorg ervoor dat u alleen microfiber doeken gebruikt, zoals degene die meegeleverd is met uw Explore 8.

Veeg voorzichtig en geleidelijk met de microfiber doek over het scherm.

Als u ervoor kiest om het LCD-scherm schoon te maken met een vloeibaar reinigingsmiddel, zorg er dan voor dat dit reinigingsmiddel geschikt is voor LCD-schermen. Gedistilleerd water, isopropyl alcohol en azijn-water oplossingen (niet meer dan 10% azijn) zijn

veilige reinigingsvloeistoffen voor uw LCD-scherm.

Gebruik alleen de minimale hoeveelheid vloeistof om lekken in het apparaat te voorkomen. Als het erin sijpelt, zou er schade aan het apparaat kunnen optreden. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen achterblijven op het scherm. Herhaal de vorige stappen voor vlekken die moeilijker te verwijderen zijn.

- **Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen om uw Explore 8 schoon te maken.**
- **Spuit nooit een vloeistof rechtstreeks op het LCD-scherm.**
- **Gebruik nooit schoonmaakproducten die ethyl alcohol, ethyl zuur, ammoniak, aceton of methylchloride bevatten.**
- **Gebruik nooit keukenpapier om het LCD-scherm schoon te maken.**

BIJLAGE B – SPECS

Maat: 24 x 204 x 153.2 mm

Scherm: 8" ISP LCD

Gewicht: 580 g

Stroom invoer: USB Type C connector.
5V@3A, 9V@2A or 12V@1.5A

Batterij levensduur: 4.5 hours

Oplaadtijd: 2 hours (when device is off)

Ondersteunde HDMI formaten:

1280x720p 60Hz, 50Hz

1920x1080p 60Hz, 50 Hz, 24Hz

1920x1080i 60Hz, 50Hz

Geen ondersteuning voor DVI-emulatie

Operationele condities:

Temperatuur: 10 °C to 40 °C / 50 °F to 104 °F

Vochtigheid: 20% to 80%

Transport- en opslagvoorwaarden:

Temperatuur: -20 °C to 60 °C / -4 °F to 140 °F

Vochtigheid: 10% to 95%

BIJLAGE C – FCC INFO

FCC Statement:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC Waarschuwingen:

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Opmerkingen: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen

schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Ontvang of verplaats de ontvangende antenne.
- Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

-Connecteer de apparatuur in een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

Opmerking: Dit apparaat is getest met afgeschermdde kabels op de randapparatuur. Bij het apparaat moeten afgeschermdde kabels worden gebruikt om naleving te garanderen.

BIJLAGE D – Garantie

HumanWare garandeert Explore 8, van kracht vanaf de datum van aankoop, vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald in het land of de regio van aankoop.

Deze garantie is niet overdraagbaar en is van toepassing op alle gevallen waarin de schade niet het gevolg is van oneigenlijk gebruik, mishandeling of nalatigheid. Onjuist gebruik

is gebruik van dit apparaat anders dan beschreven in deze handleiding. HumanWare of haar distributeurs zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

Geen vervanging of reparatie gedekt door de garantie zal worden uitgevoerd, tenzij het systeem vergezeld gaat van een kopie van de originele aankoopbon. Bewaar alstublieft uw originele kassabon. Als het systeem moet worden geretourneerd, gebruik dan de originele verpakking.



Oplossingen voor een visuele uitdaging

Inhoudelijke of technische vragen over dit product?
Vind je het antwoord niet in deze handleiding?
Dan staan onze Service & Support collega's voor je klaar.

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Antwerpen
Kempensstraat 100
B-2000 Antwerpen
T+32 3 828 80 15

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60